

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____
 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frío para Laboratorios - Ultracongelación -86°C

Modelo: UFV-802 HC

Referencia	19101694
Dimensiones (mm)	1205 x 1025 x 1955
Volumen interior bruto (L)	775
Número estantes	3
Capacidad crioboxes 2'	600

Características generales

La amplia gama de ultracongeladores de -86°C representa la decidida apuesta de Effimed por la innovación en los más exigentes niveles de conservación a largo plazo. Especialmente diseñados para su uso en biorepositorios, almacenamiento de muestras y todo tipo de material sensible.

Características:

- Seguridad mediante 12 puntos de control con alarma asociada.
- Conservación a la temperatura indicada con exactitud $\pm 0,1^\circ\text{C}$.
- Comunicación y reporte de información en remoto.
- Bloqueo de puertas con llave y teclado con contraseña para evitar operaciones o accesos no autorizados.

Comunicación:

- La pantalla táctil de 7 pulgadas permite interactuar con el ultra congelador de forma intuitiva.
- Podemos modificar el set point desde -40°C hasta -86°C .
- Sistema de control de inventario.

Control de funcionamiento con sistema de alarmas con monitorización de:

- Alta/baja temperatura de producto.
- Alta temperatura ambiente.
- Fallo de alimentación.
- Batería baja.
- Error del sensor.
- Fallo del sistema.
- Fallo de enfriamiento del condensador.
- Fallo del registro de datos USB.
- Puerta entreabierta.
- Error de comunicación de la placa principal.

Eco-diseño:


- Sistema de refrigeración mediante refrigerante respetuoso con el medio ambiente.
- Compresores de alta eficiencia.
- Sistema de enfriamiento "Direct Cooling". Mínimo consumo de energía, menores emisiones acústicas y mayor seguridad.
- Paneles de aislamiento de vacío con tecnología VIP PLUS.

Acceso intuitivo:

- Doble sistema de puertas que mejora aislamiento y consumo energético.
- Mango anatómico y válvula de vacío que permite la fácil apertura.
- Doble sistema de puertas que mejora aislamiento y consumo energético.

Opciones:

- Accesorios de almacenaje realizados en AISI 304 para optimizar la capacidad del Ultra congelador.

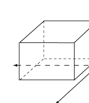

Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1320 MM
Ancho bruto (Fondo): 1155 MM
Alto bruto 2171 MM
Peso bruto / embalado: 462 KG

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1205
Ancho neto (Fondo) (mm):	1025
Alto neto (mm):	1955
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1320
Ancho bruto (Fondo) (mm):	1155
Alto bruto (mm):	2171
Peso bruto / embalado (kg):	462
Peso neto (kg):	365

ESPECIFICACIONES PRODUCTO MEDICAL

Ruedas:	Sí
Cerraduras:	Sí
Material interior:	Inox
Puerta de Cristal:	No
Nivel de ruido (dB):	50
Ámbito mercado:	Europe
Volumen interior bruto (L):	775
Material estante:	Acero inoxidable
Puerta reversible:	No
Ozono:	No
Número estantes:	3
Altura interior (mm):	1286
Ancho interior (mm):	865
Fondo interior (mm):	696
Material exterior:	Chapa pintada epoxy
Espesor aislamiento:	130
Accesos sonda externa (número):	3
Cajones extraíbles deslizantes:	No
Puertas internas, número:	4
Capacidad crioboxes 2':	600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRIO MEDICAL


Tipo gas:	Mezcla HC
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-86°C » -40°C
Agente Expandente:	C5H12
Carga de gas refrigerante (KG):	0,470
Numero compartimientos:	Uno
Descongelación:	Manual
Tipo de enfriamiento:	Estático
Número de compresores:	2

ESPECIFIC. TÉCNICAS ELECTRICIDAD MEDICAL

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Voltaje:	230V

SEGURIDAD CONTROLADOR MEDICAL

Alarma alta-baja temperatura:	Sí
Alarma fallo suministro elect.:	Sí
Alarma fallo sonda:	Sí
Alarma puerta abierta:	Sí
Batería reserva 72h:	Sí
Puerto USB:	Sí
RS485:	Sí
Memoria máx y mínima temperatu:	Sí
Contacto libre de potencia:	Sí
Termostato de seguridad:	Sí
Data Logger:	No
Conexión WIFI:	Sí
Controlador con password:	Sí
Pantalla Táctil:	Sí

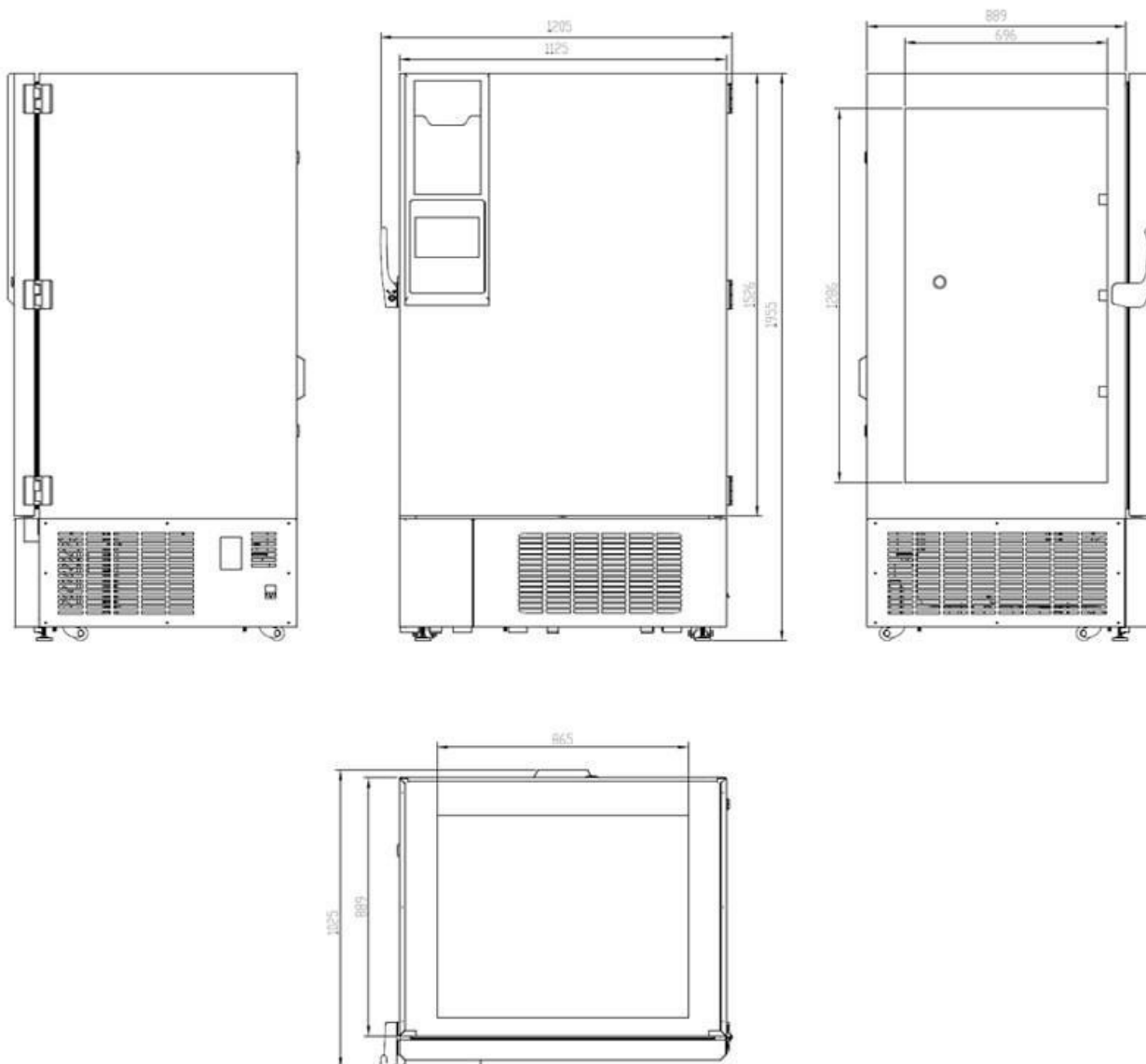

Familias relacionadas



Recirculadores de agua



Ultra congelación -40°C



Racks deslizantes Inox



Combis refrigeración y congelación



Máquina de hielo granular